

Il sistema di strumenti
con micro lame chirurgiche e manici

FEATHER®

è stato sviluppato specificamente
per la chirurgia parodontale
e rigenerativa

NEW



Applicazione

Fig. 370

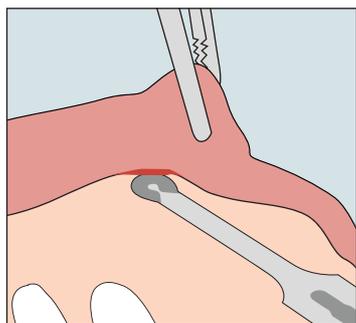
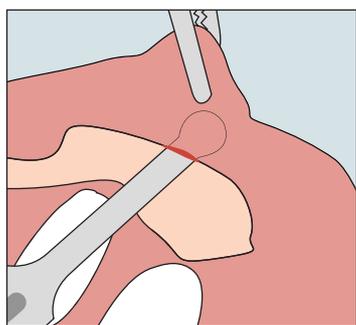


Fig. 390




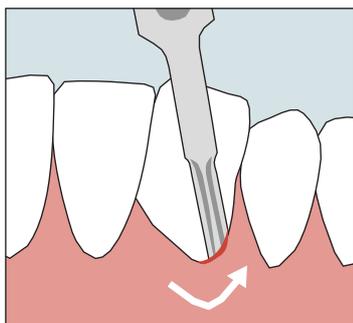


Fig. 390c

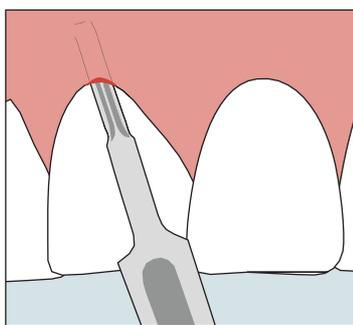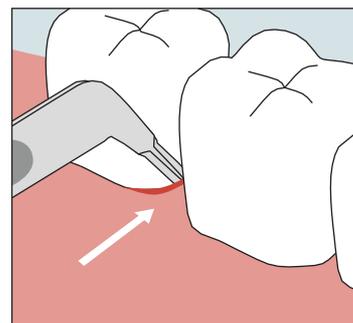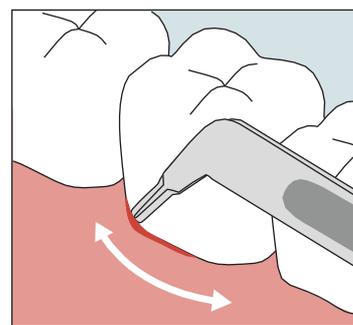

Benefici generali

Precisione di taglio e prestazioni

Le lame in acciaio inossidabile offrono una capacità di taglio e una durata eccezionali, grazie alla precisione della doppia levigatura.

Particolarmente compatibili


Le lame sono adatte per tutte le tipologie di manici chirurgici standard oltre che per i FEATHER® Titan Roundshaft Handle.

Di facile utilizzo

Le lame sono adatte per applicazioni che necessitano del microscopio e sono pronte all'uso subito dopo la rimozione dalla confezione sterile.

Benefici


Fig. 370 Lama tagliente su entrambe i lati

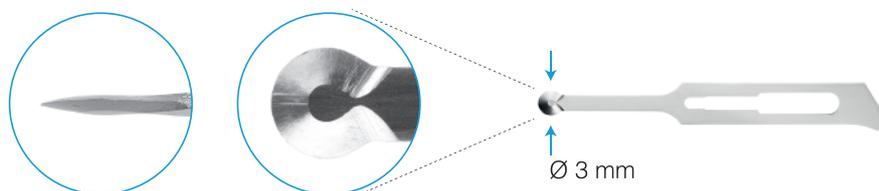

Confezione da 10 pezzi

- ▶ Maggior sicurezza per allargare orizzontalmente il lembo a spessore parziale utilizzando il bordo superiore della punta arrotondata tagliando e sollevando contemporaneamente
- ▶ Adatto per ritagliare le membrane in chirurgia rigenerativa. Ideale per allargare l'incisione (o scollamento) orizzontale del lembo


Fig. 390 Lama tagliente su un lato

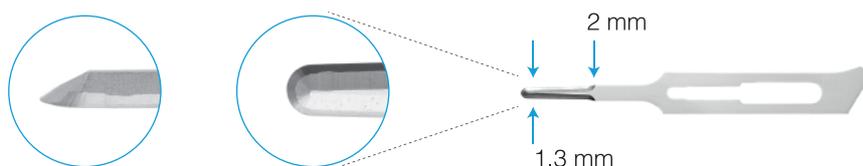

Confezione da 10 pezzi

- ▶ Utilizzabile in maniera ideale per creare lembi adeguati nelle tecniche di ricopertura delle recessioni grazie alla micro lama ed al suo minimo spessore.
- ▶ La forma della lama, con bisello singolo, e la sua sottigliezza la rendono ideale per incisioni precise nel solco, soprattutto nella gengiva dei denti anteriori.

Fig. 390c Lama tagliente su entrambe i lati

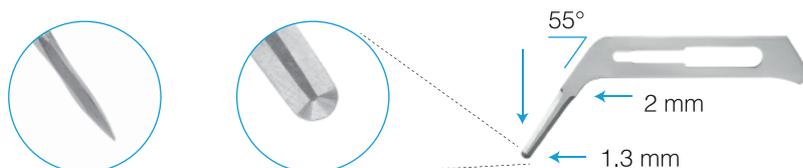

Confezione da 10 pezzi

- ▶ Perfettamente utilizzabile per l'incisione delle papille interdentali nella zona dei molari, grazie alla punta sottile e alla sua forma angolata.
- ▶ Ideale per l'incisione del solco nell'area del dente posteriore grazie alla forma angolata che ne permette una maggior maneggevolezza.